



### Maksimum Akış için 16 Kanal

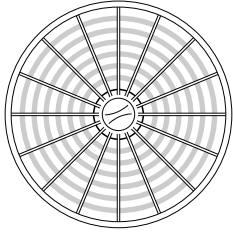

### Maksimum İş için tasarlandı

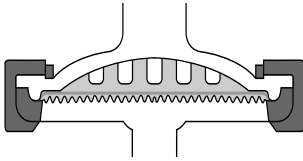

### Özellikler

Gözenek Boyutu	0.2µm, 0.45µm		
Çap	4mm	13mm	25mm
EFA*	0.07cm <sup>2</sup>	0.8cm <sup>2</sup>	4.15cm <sup>2</sup>
Hold-Up Volume	<5µl	<20µl	<50µl

\*EFA: Etkili Filtrasyon Alanı

## Tek Kullanımlık Membranlı Şırınga Filtreler

**mdi** enjektör filtreler propilen bir dış koruma içinde membran disk filtreye sahiptir. **mdi** filtreler;

- ◆ Tam alıkoyma
- ◆ Son derece az ekstrakt
- ◆ Geniş kimyasal uyumluluk
- ◆ HPLC onaylı: yabancı maddelerin numuneye geçmediğini garanti eder
- ◆ Maksimum akış hızı için 16 kanallı
- ◆ Maksimum verim için tasarlanmıştır.

### Mevcut Modeller

#### Nylon-66 Membran Enjektör Filtreler

**SY4NN, SY13NN ve SY25NN:** Hidrofilik Nylon-66 membran filtre içerirler ve organik çözücülerin büyük bir kısmıyla uyumludurlar.

#### SY25GN

Bu özel enjektör filtreleri mikroglassfiber bir ön fitre ve Nylon-66 membran filtre içerir ve filtrasyonu zor bulanık çözeltiler için idealdir.

#### PVDF Membran Enjektör Filtreler

#### SY4VF, SY13VF, and SY25VF

Hidrofilik PVDF membran içeren enjektör filtreler.

#### SY25VG

Yüksek verimlilik için mikroglassfiber ön filtreli PVDF enjektör filtreler.

#### PTFE Membran Enjektör Filtreler

#### SY4TF, SY13TF, and SY25TF

İnert PTFE membran içeren enjektör filtreler güçlü çözücülerle kullanım için tasarlanmıştır.

#### SY25TG

Çok katmanlı mikroglassfiber ön filtreli PTFE enjektör filtreler, filtrasyonu zor çözeltiler için yüksek verimliliği kimyasal inertlikle birlikte sunar.

#### Polipropilen Membran Enjektör Filtreler

#### SY25PP

Hidrofilik poliropilen membran filtre içerirler ve organik çözücülerin büyük bir kısmıyla uyumludur.

#### SY25GP

Hidrofilik poliropilen membran filtre ve mikroglassfiber ön filtre içeren enjektör filtrelerdir. Filtrasyonu zor olan çözeltiler için yüksek verimlilik ve geniş kimyasal uyumluluk sunar.

#### Selüloz Asetat Membran Enjektör Filtreler

#### SY4CA, SY13CA, and SY25CA

Düşük protein bağlayıcı selüloz asetat enjektör filtreler, protein örnekleri için özel olarak tasarlanmıştır.

#### Otomatik Filtrasyon Sistemleri için Enjektör Filtreler


#### SZ25\*\* and ST25\*\*

Otomatik örnek hazırlama sistemleri için farklı gözenek genişliğine sahip filtrelerdir. SZ25\*\* filtreler Zymark sistemlerine ve ST25\*\* filtreler Sotax sistemlerine uyumludur.


Zymark ve Sotax, Sotax AG İsviçre'nin tescilli ticari markalarıdır.

# Renk Kodlaması


Kolay tanımlama için **mdi** enjektör filtreleri tipleri ve gözenek genişliklerine göre farklı renktedir. Resimler, değişik tiplerdeki filtrelerin renk kodlarını gösterir.




**0.45µm SYNN**  
Nylon-66 membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.2µm SYNN**  
Nylon-66 membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.45µm SYGN**  
Nylon-66 mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.2µm SYGN**  
Nylon-66 mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.45µm SYTF**  
PTFE membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.2µm SYTF**  
PTFE membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.45µm SYTG**  
PTFE mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.2µm SYTG**  
PTFE mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.45µm SYPP**  
Polipropilen membranlı enjektör filtreler. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.2µm SYPP**  
Polipropilen membranlı enjektör filtreler. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.45µm SYGP**  
Mikroglassfiber ön filtreli polipropilen membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.2µm SYGP**  
Mikroglassfiber ön filtreli polipropilen membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.




**0.45µm SYVF**  
PVDF membranlı enjektör filtreler, 4mm-13mm-25mm modelleri mevcuttur.



**0.2µm SYVF**  
PVDF membranlı enjektör filtreler. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.



**0.45µm SYVG**  
Mikroglassfiber ön filtreli PVDF membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25 mm modelleri mevcuttur.



**0.2µm SYVG**  
Mikroglassfiber ön filtreli PVDF membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.

SYCA >> 0,2 µm ve 0,45 µm selüloz nitrat enjektör filtrelerin naturel beyaz modeli mevcuttur.

Tip		Boyut		Gözenek Boyutu		Giriş/Çıkış		XX	Steril/ Steril olmayan		Paket Boyutu	
Tip	Kod	Çap	Kod	Göz. Boyutu	Kod		Kod		Kod	Paket Boyutu	Kod	
SYNN	SYNN	4mm	01	0.2µm	01	Dişi	M		Steril Olmayan	1	100	04
SYGN	SYGN	13mm	03	0.45µm	02	Erkek	N					
SYTF	SYTF	25mm	06			Luer Slip						
SYTG	SYTG											
SYVF	SYVF											
SYVG	SYVG											
SYCA	SYCA											
SYPP	SYPP											
SYGP	SYGP											

**Örnek:** SYNN 06 01 MN XX 1 04

**SZ25\*\* and ST25\*\* Şırınga filtreleri \*\* bölümleri istenilen membran türüne göre kodlanarak sipariş edilebilir.**

**Örnek: Zymark İşlem Birimi için Naylon Membran Şırınga Filtreleri**

SZNN	06	01	MN	XX	1	04
------	----	----	----	----	---	----

Sipariş  
Bilgileri