



CROSS CHECK | ACP Pişirme Etkinliği Testi

CrossCheck çığ ette doğal olarak bulunan bir enzim olan asit fosfatazın aktivitesini ölçebilen biyoluminesans prensibine dayalı bir hızlı testtir. CrossCheck ürüne uygulanan ısıtım işlem uygulamasının doğrulanması ve gıda ile temas eden yüzeylerde çığ et kalıntıları kaynaklı çapraz kontaminasyon risklerinin tespitinde kullanılmaktadır.

Avantajları:

- 2-5 dakika içinde sonuç elde edilmesi
- 2 dakikada hızlı sonuç veya 5 dakikada yüksek hassasiyet ile sonuç seçenekleri
- Peletin sulandırılmasına ihtiyaç olmayan stabil sıvı ayırıcı ile düşük varyasyon ve yüksek doğrulukta sonuçlar sunmaktadır
- Pişirme etkinliğinin doğrulanması için doğrudan kırmızı et, beyaz et ve balık eti üzerinde kullanım
- Çığ et kalıntılarının ölçümü ve muhtemel kontaminasyonların tespiti için gıda ile temas eden yüzeylerde kullanım
- Patentli tasarımı kullanıcı kaynaklı varyasyonu azaltır
- Önceden ıslatılmış svab örnekleme verimliliğini artırır
- Çevreci tasarımı ile diğer testlere nazaran %50 daha az plastik kullanılarak üretilmiştir
- %100 geri dönüştürülebilir materyalden üretilmiştir
- Buzdolabı sıcaklığında raf ömrü 12 aydır

Hassasiyeti:

- %0.1 ve daha az oranda çığ eti tespit edebilir
- Daha yüksek hassasiyet için inkübasyon süresi seçeneği

Katalog No.

Ürün

Miktar

CX-3000


CrossCheck ACP Cooking Efficiency Test

100




Destek dokümanları, uygulama videoları ve daha fazlası için; www.hygiena.com
www.kemitekskimya.com.tr info@kemitekskimya.com.tr +90 216 449 58 70

CrossCheck Prosedürü

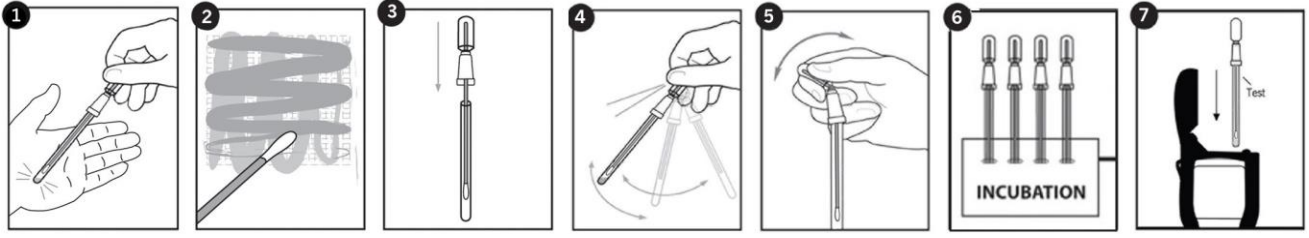

Ürün testleri:

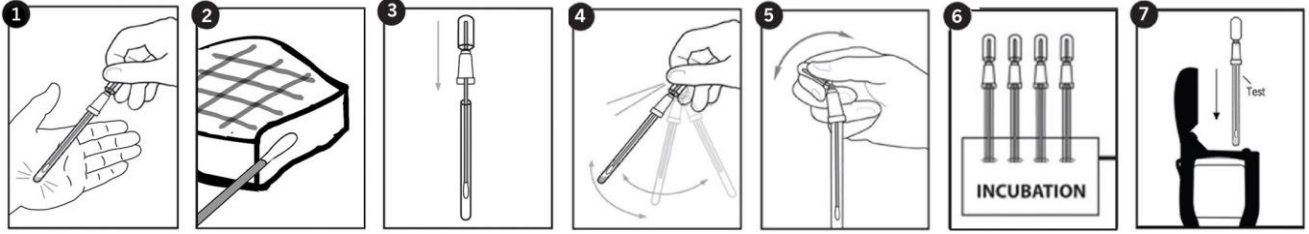

İlgili Ürünler

EnSURE™ İzleme Sistemi

EnSURE™ CrossCheck'in yanısıra ATP hijyen kontrolü, mikrobiyolojik ve alerjen testlerinin ölçümlerinde kullanılan oldukça hassas bir luminometredir. EnSURE, SureTrend isimli bir veri izleme, depolama ve analiz etme yazılımını içermektedir.



UltraSnap™ Yüzey ATP Testi

UltraSnap, yüzeylerde ATP varlığının kontrolü için Hygiena™ luminometreleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan pratik bir test kitidir. UltraSnap, maksimum geri kazanım sağlayan önceden ıslatılmış bir svab ve tekrarlanabilir ve doğru sonuçlar almanıza olanak sağlayan benzersiz stabil sıvı ayıraç içermektedir.

PRO-Clean™ Protein Kalıntı Testi

PRO-Clean™ temizlik sonrasında yüzeylerde kalan protein kalıntılarını 1-10 dakika içinde tespit edebilen ve bir cihaz gerektirmeyen bir test kitidir. Protein varlığında test kiti içindeki ayıraç mor renk almaktadır.

MicroSnap™ İndikatör Mikroorganizma Testleri

MicroSnap™ spesifik bakterilerin aynı gün içinde tespiti ve sayımını mümkün kılan bir hızlı test platformudur. Koliform, *Escherichia coli*, toplam mikroorganizma ve *Enterobacteriaceae* tespiti ve sayımı için dört farklı MicroSnap™ test kiti mevcuttur.



Katalog No.

Ürün

Miktar

ENSURE	EnSURE™ Monitoring System with SureTrend Software	1
US2020	UltraSnap™ Surface ATP Test	100
PRO-100	PRO-Clean™ Protein Residue Test	100

Ürün
kataloguna
bakınız

MicroSnap™ : Total, EB, Coliform, and *E. coli*

Ürün
kataloguna
bakınız



Destek dokümanları, uygulama videoları ve daha fazlası için; www.hygiena.com

www.kemitekskimya.com.tr

info@kemitekskimya.com.tr

+90 216 449 58 70