




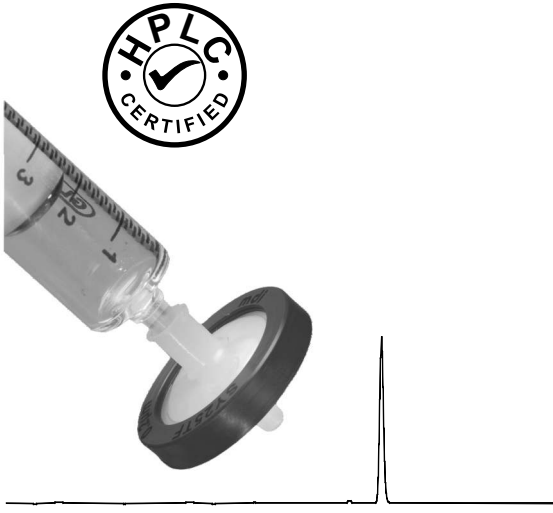

Maksimum Akış için 16 Kanal

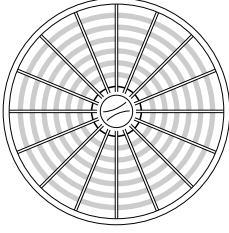

Maksimum İş için tasarlandı

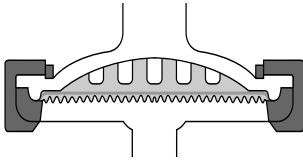

Özellikler

Gözenek Boyutu	0.2µm, 0.45µm		
Çap	4mm	13mm	25mm
EFA*	0.07cm ²	0.8cm ²	4.15cm ²
Hold-Up Volume	<5µl	<20µl	<50µl

*EFA: Etkili Filtrasyon Alanı

Tek Kullanımlık Membranlı Şırınga Filtreler

mdi enjektör filtreler propilen bir dış koruma içinde membran disk filtreye sahiptir. **mdi** filtreler;

- ◆ Tam alıkoyma
- ◆ Son derece az ekstrakt
- ◆ Geniş kimyasal uyumluluk
- ◆ HPLC onaylı: yabancı maddelerin numuneye geçmediğini garanti eder
- ◆ Maksimum akış hızı için 16 kanallı
- ◆ Maksimum verim için tasarlanmıştır.

Mevcut Modeller

Nylon-66 Membran Enjektör Filtreler

SY4NN, SY13NN ve SY25NN: Hidrofilik Nylon-66 membran filtre içerirler ve organik çözücülerin büyük bir kısmıyla uyumludurlar.

SY25GN

Bu özel enjektör filtreleri mikroglassfiber bir ön fitre ve Nylon-66 membran filtre içerir ve filtrasyonu zor bulanık çözeltiler için idealdir.

PVDF Membran Enjektör Filtreler

SY4VF, SY13VF, and SY25VF

Hidrofilik PVDF membran içeren enjektör filtreler.

SY25VG

Yüksek verimlilik için mikroglassfiber ön filtreli PVDF enjektör filtreler.

PTFE Membran Enjektör Filtreler

SY4TF, SY13TF, and SY25TF

İnert PTFE membran içeren enjektör filtreler güçlü çözücülerle kullanım için tasarlanmıştır.

SY25TG

Çok katmanlı mikroglassfiber ön filtreli PTFE enjektör filtreler, filtrasyonu zor çözeltiler için yüksek verimliliği kimyasal inertlikle birlikte sunar.

Polipropilen Membran Enjektör Filtreler

SY25PP

Hidrofilik polipropilen membran filtre içerirler ve organik çözücülerin büyük bir kısmıyla uyumludur.

SY25GP

Hidrofilik polipropilen membran filtre ve mikroglassfiber ön filtre içeren enjektör filtrelerdir. Filtrasyonu zor olan çözeltiler için yüksek verimlilik ve geniş kimyasal uyumluluk sunar.

Selüloz Asetat Membran Enjektör Filtreler

SY4CA, SY13CA, and SY25CA

Düşük protein bağlayıcı selüloz asetat enjektör filtreler, protein örnekleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Otomatik Filtrasyon Sistemleri için Enjektör Filtreler

SZ25** and ST25**

Otomatik örnek hazırlama sistemleri için farklı gözenek genişliğine sahip filtrelerdir. SZ25** filtreler Zymark sistemlerine ve ST25** filtreler Sotax sistemlerine uyumludur.

Zymark ve Sotax, Sotax AG İsviçre'nin tescilli ticari markalarıdır.

Renk Kodlaması

Kolay tanımlama için **mdi** enjektör filtreleri tipleri ve gözenek genişliklerine göre farklı renktedir. Resimler, değişik tiplerdeki filtrelerin renk kodlarını gösterir.

	0.45µm SYNN Nylon-66 membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYGN Nylon-66 mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYTF PTFE membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYTG PTFE mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYPP Polipropilen membranlı enjektör filtreler. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYGP Mikroglassfiber ön filtreli polipropilen membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYVF PVDF membranlı enjektör filtreler, 4mm-13mm-25mm modelleri mevcuttur.
	0.45µm SYVG Mikroglassfiber ön filtreli PVDF membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25 mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYNN Nylon-66 membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYGN Nylon-66 mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYTF PTFE membran enjektör filtre. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYTG PTFE mikroglassfiber ön filtreli enjektör filtre. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYPP Polipropilen membranlı enjektör filtreler. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYGP Mikroglassfiber ön filtreli polipropilen membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYVF PVDF membranlı enjektör filtreler. 4mm, 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.
	0.2µm SYVG Mikroglassfiber ön filtreli PVDF membranlı enjektör filtreler. 13mm ve 25mm modelleri mevcuttur.

SYCA >> 0,2 µm ve 0,45 µm selüloz nitrat enjektör filtrelerin naturel beyaz modeli mevcuttur.

Tip		Boyut		Gözenek Boyutu		Giriş/Çıkış		XX	Steril/ Steril olmayan		Paket Boyutu	
Tip	Kod	Çap	Kod	Göz. Boyutu	Kod		Kod			Kod	Paket Boyutu	Kod
SYNN	SYNN	4mm	01	0.2µm	01	Dişi	M			1	100	04
SYGN	SYGN	13mm	03	0.45µm	02	Luer Kilit						
SYTF	SYTF	25mm	06			Erkek	N					
SYTG	SYTG					Luer Slip						
SYVF	SYVF											
SYVG	SYVG											
SYCA	SYCA											
SYPP	SYPP											
SYGP	SYGP											

Örnek:

SYNN	06	01	MN	XX	1	04
------	----	----	----	----	---	----

SZ25 and ST25** Şırınga filtreleri ** bölümleri istenilen membran türüne göre kodlanarak sipariş edilebilir.**

Örnek: Zymark İşlem Birimi için Naylon Membran Şırınga Filtreleri

SZNN	06	01	MN	XX	1	04
------	----	----	----	----	---	----

Sipariş Bilgileri