



PRO-Clean™ | Protein Kalıntı Testi

PRO-Clean temizlik uygulamaları sonrasında yüzeylerdeki protein kalıntılarını tespit ederek ürün kalitesinin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş hızlı ve doğru sonuçlar veren bir yüzey kontrol testidir. Yüzeyden kolayca örnek almak, ayırıcı kolayca örnek ile buluşturmak ve protein kalıntılarını renk değişimi ile kolayca tespit etmek için tasarlanmıştır. Renk değişiminin hızı ve renk yoğunluğu yüksek kontaminasyonun bir göstergesidir. PRO-Clean hijyen uygulamalarının validasyonuna ve düzeltici faaliyet ihtiyaçlarının hızla tespitine olanak sağlar.

Avantajları:

- 1-10 dakika içinde sonuç
- Bir cihaz gerektirmeyen ve kolayca gözlemlenebilen renk değişimi
- Benzersiz sıvı stabil ayırıcı sayesinde tutarlı sonuçlar
- Önceden ıslatılmış svab yüksek örnekleme kapasitesi, yüksek geri kazanım ve tutarlı sonuçlar sağlar
- %100 geri dönüştürülebilir materyalden imal edilmiştir
- Oda sıcaklığında veya buzdolabı sıcaklığında (2-25°C) 18 ay raf ömrü

Hassasiyeti:

- 1 dakika sonra 80 µg proteini tespit edebilir
- 5 dakika sonra 50 µg proteini tespit edebilir
- 10 dakika sonra 20 µg proteini tespit edebilir
- 10 dakikadan daha uzun sürede gözlenen renk değişimlerini göz önünde bulundurmaz

Renk Sonuçları:

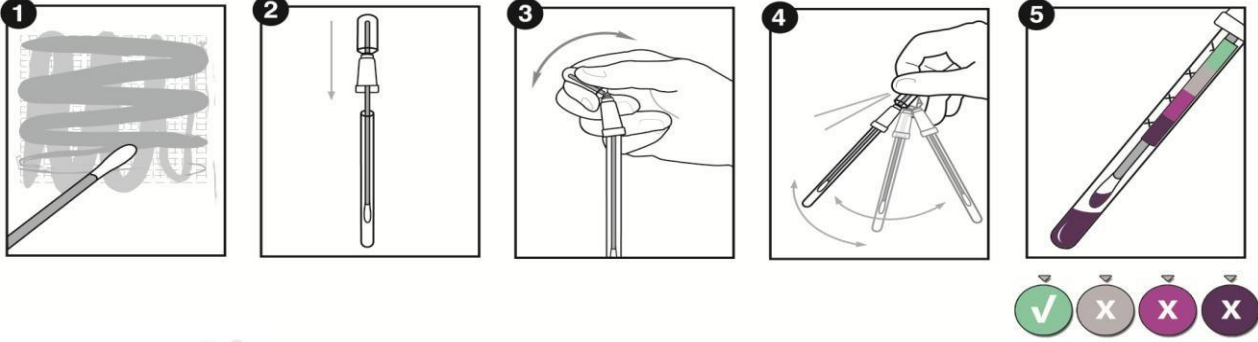


Uygulama videolarımızı
youtube.com/HygienaTV kanalından
izleyebilirsiniz



www.hygiena.com adresinde destek
dokümanları, uygulama videoları ve daha
fazlasını bulabilirsiniz

Katalog No.	Ürün	Miktar
PRO-100	PRO-Clean Yüzey Protein Kalıntı Testi	100

PRO-Clean Prosedürü:Uygulama videosunu [youtube.com/HygienaTV](https://www.youtube.com/HygienaTV) kanalından izleyebilirsiniz**İlgili Ürünler:****EnSURE**

EnSURE ATP, TVC, Koliform, *E. coli* ve daha birçok parametre için kullanılabilen yüksek hassasiyete sahip bir luminometredir. EnSURE izleme sistemi SureTrend isimli veri izleme yazılımını içermektedir.

UltraSnap & AquaSnap

UltraSnap & AquaSnap yüzeylerde ve sıvı örneklerde ATP miktarını ölçmektedir. ATP tüm canlı organizmalara ait organik materyallerde bulunmaktadır ve temizlik uygulamaları sonrasında kayda değer oranda azalmaktadır. ATP izlemesi temizlik uygulamalarının verimliliğine ilişkin hızlı ve objektif önlemlerin alınabilmesini sağlar.

AllerFlow Gluten

AllerFlow Gluten yüzeylerde gluten kalıntılarının tespiti için hızlı ve kullanışlı bir testtir. AllerFlow Gluten 10 dakika içinde 5 µg (5 ppm) düzeyinde glütene tespit edebilir.

AllerSnap

AllerSnap çok sayıda alerjen için 15-30 dakika içinde sonuç verebilen kolorimetrik temelli bir testtir. AllerSnap yüzeylerde 3 µg düzeyinde alerjen proteinini tespit edebilir.

SpotCheck Plus

SpotCheckPlus60 saniye içinde sonuç verebilen ve ilave bir cihaz gerektirmeyen kolorimetrik temelli bir testtir. Birçok gıda kalıntısının başlıca bileşeni olan glikoz ve laktoz kalıntılarını tespit edebilir.



Katalog No.	Ürün	Miktar
ENSURE	EnSURE İzleme Sistemi, SureTrend yazılımı ile birlikte	1
US2020	UltraSnap: Yüzey ATP testi	100
AQ-100F	AquaSnap Free Water: Sıvı ATP testi	100
AQ-100FX	AquaSnap Total Water: Sıvı ATP testi	100
ALF-GL	AllerFlow Gluten: Glütene yüzey kalıntı testi	25
ALS-100	AllerSnap Allergen Prevention: Alerjen kalıntı testi	100
GL100	SpotCheck Plus: Glikoz ve laktoz yüzey kalıntı testi	100